


Jednoduchý přenos dat S PC softwarem EasyDirect™




Efektivní zpracování výsledků

EasyDirect™ pH PC software automaticky shromažďuje výsledky až ze tří zařízení. Snadno kontrolujete záznamy a filtrujete podle data, přístroje, uživatele nebo vzorku. Eliminujte chyby ručního přepisování, ušetřete čas a bezpečně ukládejte data.

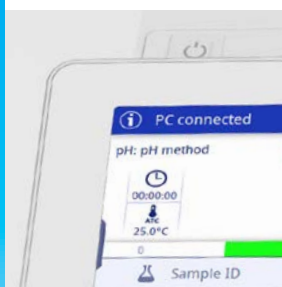


Snadné reporty a export

Zjednodušte zpracování dat nastavením automatického exportu výsledků (z přístroje do EasyDirect™ a z EasyDirect™ do PC) – nebo manuálně exportujte, co potřebujete, když to potřebujete.

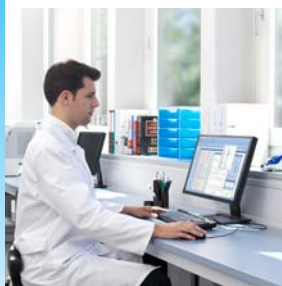

Relevantní informace

EasyDirect™ pH zjednodušuje nastavení tím, že ve výchozím nastavení zobrazuje nejrelevantnější parametry měření. Upravte rozvržení výběrem informací, které chcete vidět na první pohled. Uložte si oblíbené šablony a kdykoli je znovu použijte.

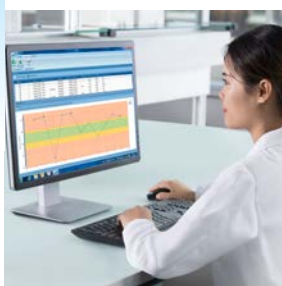

Smysluplné grafy

Funkce grafu poskytuje přehled shromážděných výsledků. Generování grafů naměřených a kalibračních dat, včetně regulačních diagramů a základního statistického vyhodnocení. Zkontrolujte výsledky přímo v EasyDirect™, aniž byste museli použít jiný program. Získejte přehled o datech a snadno identifikujte trendy.



Zpracování dat

Snadné a přímé

Připojte pH metr k softwaru EasyDirect™ pH a zlepšete správu dat. Během několika kliknutí se data naměřená na pH nebo konduktometru jednoduše přenesou do počítače. Aplikace ukládá neupravená data a umožňuje další tisk nebo analýzu. Zjednodušte zpracování dat pomocí automatického exportu do .xls nebo .csv souborů. Vytiskněte data přímo na libovolné tiskárně připojené nebo nainstalované v počítači. EasyDirect™ pH je jednoduchá a bezpečná alternativa pro ukládání a manipulaci s daty naměřenými pH.

Stáhněte si 45denní bezplatnou zkušební verzi na:

► www.mt.com/EasyDirectpH



Kompatibilní přístroje

SevenExcellence™, SevenDirect™, FiveEasy™ Plus, Seven2Go™ a Pro2Go mohou přenášet data do EasyDirect™ pH

Specifikace softwaru

| | | |
|---|---|---|
| Typy kompatibilních přístrojů | SevenExcellence, SevenDirect, Seven2Go Pro, FiveEasy Plus, Pro2Go, SevenCompact, SevenCompact Duo | |
| Konektivita | USB, RS232 (pouze SevenExcellence) | |
| Počet přístrojů | Až 3 přístroje | |
| Formáty exportu | .csv, .xlsx | |
| Jazyky | Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, polština, portugalská, japonština, čínština, korejština, thajština | |
| Požadavky na PC | Operační systém | Windows 10, 64 bit, verze 1809 nebo vyšší |
| | Místo na disku | Alespoň 32 GB |
| | RAM | Alespoň 4 GB |
| | Rozlišení obrazovky | 1024 × 768 nebo vyšší |
| Objednací číslo EasyDirect™ pH licence | 30323214 | |