

## LABORATORNÍ KOMOROVÁ PEC LE

Ekonomičtější verze laboratorní pece L pro krátkodobější provoz

Laboratorní pece LE nejsou sice tak robustní jako pece L, ale mohou se pochlubit neporazitelným poměrem cena/výkon. Pece LE vám poslouží úplně stejně dobře jako pece L při zkouškách a testování. Rozhodně od nich ale nečekejte provoz 24/7 – na to jsou vhodnější pece L.

Rychlý náběh na Tmax

Nastavitelný přívod vzduchu

Skvělá cena



Jednoduché ovládání i instalace



Atypické úpravy



Expedice už do 2 dnů



Bezhluknost



Záruka 24 měsíců



Okamžitá technická podpora



LE 09/11

**Standardní vybavení:**

- regulátor Ht60B (regulace na konstantní hodnotu)
- topné elementy v křemenných trubkách
- izolace deskami z minerálního vlákna
- větrací komínek pro odvětrání pracovního prostoru pece
- šoupátko ve dveřích pro ovládání přívodu vzduchu
- termočlánek typu „K“
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
- koncový spínač pro bezpečné otevření pece
- ručně otevírané dveře směrem dolů
- stolní provedení

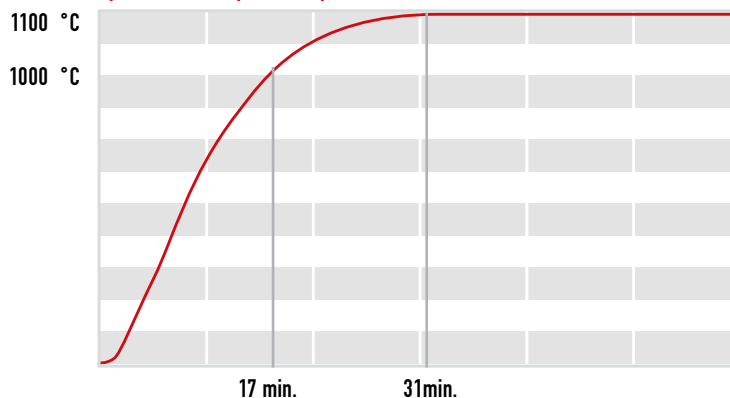
**Příslušenství za příplatek:**

- regulátor Ht40P (10 programů po 15 krocích)
- injektor s odťahovým ventilátorem a přerušovačem tahu pro odtah zplodin (pouze s regulátorem Ht40P)
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky řízený přívod plynu)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci příslušenství za příplatek je nutná konzultace s technickou kanceláří.



LE 09/11

**Rychlost náběhu pece na teplotu**

Šoupátko ve dveřích pece



Topná tělesa v trubkách z křemenného skla

Typ pece	Tmax	Tmax pro dlouhodobý provoz	Objem	Vnější rozměry* (šxvxdh)	Vnitřní rozměry (šxvxdh)	Příkon	Hmotnost	Jištění **	Napětí	Max. nosnost dna
	°C	°C	l	mm	mm	kW	kg		V	kg
LE 05/11	1100	1000	5	470x310x455	170x130x230	1,8	20	16/1	230	6
LE 09/11	1100	1000	9,4	490x350x515	190x170x290	2,3	24	16/1	230	6
LE 15/11	1100	1000	14,4	550x350x565	250x170x340	3,0	28	16/1	230	6

\* Vnější rozměry uvedeny s uzavřenými dveřmi.

\*\* Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.

Technické změny vyhrazeny.