

Jedinečné ve dvou řadách

Ať už je jedná o velké výzkumné zařízení, nebo o malou laboratoř, soukromou lékařskou praxi, pečovatelské zařízení nebo lékárnu – náš sortiment zahrnuje modely pro každý požadavek. Ale přesto, že jsou všechny spotřebiče tak rozdílné, jedno zůstává vždy stejné: jejich prvotřídní kvalita.

Performance Perfection

Řada Performance

Všechny spotřebiče řady Performance splňují bezpečnostní normu IEC 61010-2-011. Navíc jsou v závislosti na konkrétním zařízení splněny další standardy jako např. směrnice ATEX.



Optimální teplotní stabilita




Přehledné zobrazení teploty skladování



Vnitřní LED osvětlení



Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem

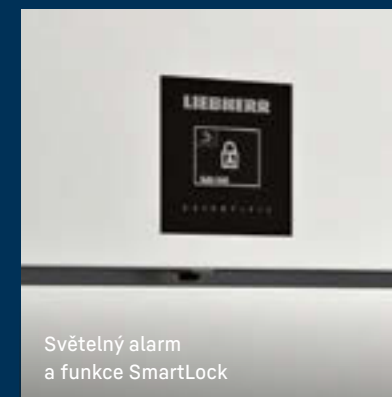

Světelný alarm a funkce SmartLock

Řada Perfection

Spotřebiče řady Perfection splňují vedle bezpečnostní normy IEC 61010-2-011 také normu DIN 13277, která definuje požadavky na laboratorní a lékařské specifikace.



Integrované rozhraní WiFi/LAN a další pro funkci SmartMonitoring

Chladničky a mrazničky pro výzkum a laboratoře



Řada Performance



Řada Perfection

Tepelná stabilita	
Bezpečnost skladování	
Rozhraní	
SmartMonitoring	
Vybavení	
Spotřeba energie	
Shoda	

Řada Performance

obec. laboratorní použití/ATEX

SRFvg/SFFsg/SRFfg/SFFfg/SCFfg/SRPvg/SFPvg/SRTvg/SRTfg/
SFTsg/SFTfg

chladničky – odchylka od požadované hodnoty < ± 3 K
mrazničky – odchylka od požadované hodnoty < ± 5 K
mrazničky s funkcí SmartFrost; SFPvg s funkcí NoFrost
možnost kalibrace
optické a zvukové výstrahy
individuální možnost nastavení alarmů
relé výstrah
funkce testu alarmu
funkce +2-°C-SafetyDevice (chladničky)
Alarm výpadku sítě ihned při přerušení provozu sítě
zaznamenávání minimální a maximální teploty
samočinně se zavírající dveře při < 90°
mechanický zámek
LAN/WiFi volitelné
lokální API (volitelně přes SmartModule)
možnost dodatečného vybavení SmartModule
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
individuálně nastavitelný časovač údržby
kolečka/seřizovací nožky jako příslušenství, SRPvg/SFPvg s kolečka ve standardu
Hűtőszekrény elpárológatótató védőburkolata (odafagyás elleni védelem), csak az üvegajtós modelleknél és az SRTvg/SRTfg modelleknél
Průchodky snímačů
Chladničky: Modely se skleněnými dveřmi se stropním osvětlením (SRPvg modelů s stropní osvětlení)
Mrazničky: bez osvětlení (SRPvg modelů s stropní osvětlení)
antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem (SRPvg/SFPvg s madlo tvaru lišty)
Super efektivní
bezpečnost podle IEC 61010-2-011
Směrnice ATEX (SRfvg/SFFfg/SCFfg/SRTfg/SFTfg)

Řada Perfection

obec. laboratorní použití

SRFvh/SFFvh/SCFvh/SRPvh/SFPvh/SRTvh/SFTvh

chladničky – odchylka od požadované hodnoty < ± 2 K
mrazničky – odchylka od požadované hodnoty < ± 5 K
mrazničky s funkcí NoFrost
možnost kalibrace
optické a zvukové výstrahy
individuální možnost nastavení alarmů
relé výstrah
funkce testu alarmu
funkce +2-°C-SafetyDevice (chladničky)
alarm výpadku sítě zálohovaný z baterie (12 h) ihned při přerušení provozu sítě
historie alarmu se zobrazením reálného času a 10 událostí
integrováný datalogger
produktové čidlo PT1000 (volitelně u modelů SFFvh)
zaznamenávání minimální a maximální teploty
samočinně se zavírající dveře při < 90°
mechanický zámek SRPvh/SFPvh s elektronickým zámkem
LAN/WiFi integrováno
lokální API
rozhraní USB pro načítání dataloggeru
SmartModule integrován
2,4" barevný displej, ovládá se dotykem a přejetím prstu
individuálně nastavitelný časovač údržby
kolečka/seřizovací nožky jako příslušenství zařízení o šířce 75 cm standardně s kolečky, SRPvh/SFPvh s kolečka ve standardu
Hűtőszekrény elpárológatótő védőburkolata (odafagyás elleni védelem), csak az üvegajtós modelleknél és az SRFvh/SCFvh/SRTvh modelleknél
Průchodky snímačů
Chladničky: Modely s izolačními a skleněnými dveřmi s vertikálním osvětlením
Mrazničky: LED osvětlení v předním krytu (SFPvh modelů s vertikálním osvětlením)
antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem (SRPvh/SFPvh s madlo tvaru lišty)
ultraefektivní
bezpečnost podle IEC 61010-2-011
splňuje normu DIN 13277