

Kvalita do nejmenšího detailu




SmartFrost (SFCse 801)
Funkce SmartFrost omezuje tvorbu námrazy na vnitřních stěnách spotřebiče i na uloženém zboží. Potřeba odmrazování je výrazně omezena – a pokud je přece jen potřeba jej provést, je odmrazení mnohem snazší díky hladkým vnitřním stěnám, které se snadno čistí. Výparník v pěnové izolaci se stará o vysokou energetickou účinnost i o dobré chlazení.




Mechanický zámek
Všechny profesionální spotřebiče Liebherr jsou vybaveny mechanickým zámkem se dvěma klíči pro skladování produktů citlivých na teplotu. Můžete si tak být jisti, že k vašemu uskladněnému zboží neměly přístup žádné nepovolané ruce.




Zapuštěný úchop
Osobitý a funkční: spotřebič můžete velmi snadno otevřít díky horizontálně integrovanému a ergonomicky namontovanému zapuštěnému madlu.

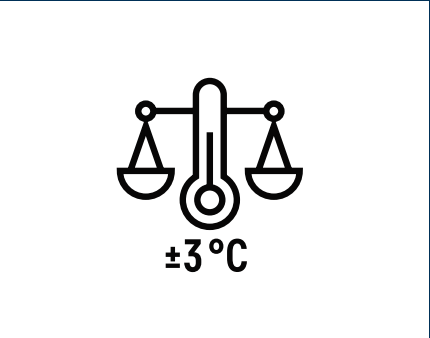

Teplotní stabilita ±3 °C
Kvalita citlivých látek zůstane zachována jen při minimálních výkyvech teploty. Chladničky Liebherr mají působivou maximální odchylku pouze ±3 °C od nastavené teploty. Zachováte tak nejen skladovací klima, ale i hodnotu Vašeho skladovaného zboží.

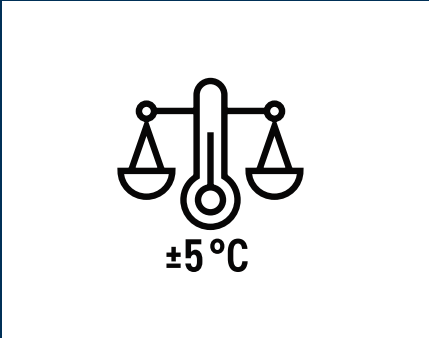

Teplotní stabilita ±5 °C
Citlivé látky nesházejí velké odchylky od nastavené skladovací teploty. Mrazničky Liebherr zaručují nepatrné kolísání teploty ve výši max. ±5 °C. Vaše cenné produkty jsou tak optimálně chráněny před poškozením a jejich kvalita zůstává nezměněna.

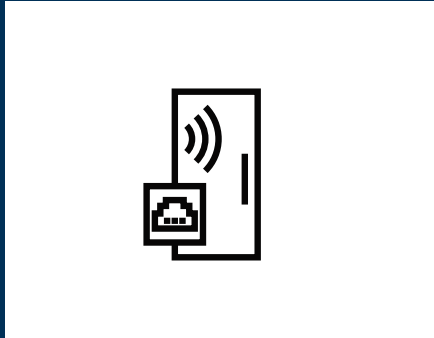

Rozhraní WiFi/LAN s možností dodatečné instalace
Rozhraní WiFi/LAN s možností dodatečné montáže propojí spotřebiče s externími systémy. Například můžete použít řešení Liebherr SmartMonitoring ke sledování a dokumentaci vnitřní teploty.



New

SRCse 801

Performance

Brutto / užitný objem	94 / 78 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	550 / 610 / 680
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	400 / 460 / 520
Spotřeba energie za rok ¹	87 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	105 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	37 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon	1,3 A
Příkon ve Watech	50 W
Chladicí systém	statický
Proces odmrazování	automatický
Rozsah teplot	+3 °C až +7 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	5,3 °C / 3,9 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Touch-Elektronic
Pracovní deska	ano, žáruvzdorné
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED
Přestavitelné odkládací plochy	2
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	400 / 336
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	40 kg / 120 kg
Počet zásuvek	
Madlo	prohlubeň pro madlo
Přůchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	30,1 / 27,8 kg
Příslušenství	
SmartModule	6145269



New

SFCse 801

Performance

77 / 59 l
550 / 610 / 680
380 / 410 / 490
158 kWh
+10 °C až +35 °C
337 kJ/h
R 600a
37 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,3 A
60 W
statický
ruční
-12 °C až -28 °C
3,3 °C / 1,7 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
Touch-Elektronic
ano, žáruvzdorné
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický
ano
SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelné)
LED
sklo
380 / 266
40 kg / 120 kg
3
prohlubeň pro madlo
1 x Ø 10 mm
mechanický
vpravo, lze zaměnit
34,9 / 32,7 kg
6145269

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček
² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.